

SIRIUS INFRAROT-ÖSENSTERILISATOR

Impfösen **ohne
Flamme** sterilisieren.

Der elektrische Ersatz für den Bunsenbrenner.
Impfösen und Nadeln sind im Quarzrohr in etwa 2–4
Sekunden sterilisiert.

Angebot anfordern

siriusmikro.com/de/SIRIUS | ÖSEN
STERILISATOR
siriusmikro.comHersteller-
Service

Alle Teile von uns

Schneller Weltversand

Ab Lager, als Mikroexport

2 Jahre Garantie

Herstellergarantie

Service für alle Marken

Vor Ort oder per
Einsendung

~1000 °C

Sterilisationstemperatur

2–4 s

Impföse und Nadel

12 V

Heizspannung

270°

Drehbereich

2 Jahre

Garantie

WARUM SIRIUS

Ohne Flamme,
ohne Gas

Stecker einstecken,
einschalten. Keine
Gasleitung, kein
Schlauch, keine
offene Flamme.

Verhindert Aerosole

Die Probe wird im
Quarzrohr sterilisiert. Aus
flüssigen Proben
entstehen keine Aerosole.

Schont den
Werkbank-Filter

Stört die Luftströmung in
der Sicherheitswerkbank
nicht.

Arbeiten mit
Handschuhen

Bequemes Arbeiten mit
Handschuhen. Die
Außenfläche können Sie
im Betrieb berühren.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Versorgung 230 V Netzspannung

Heizspannung 12 V (interner Trafo)

Sterilisationstemperatur Ca. 1000 °C

Gewicht 1,8 kg

Garantie 2 Jahre

Maße des Quarzrohrs Ø22 mm × 100 mm


Sterilisationsraum Quarzrohr

Drehbereich 270°

Sterilisationsdauer Ca. 2–4 Sekunden

Anwendung Öse, Nadel, Röhrchenöffnung, Objektträger

Weitere Angaben wie Gewicht, Leistung und Gehäusemaße nennen wir Ihnen gern auf Anfrage.

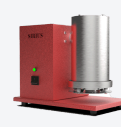

SO FUNKTIONIERT ES

1

Einschalten

Gerät an die 230-V-Steckdose anschließen. Der interne Trafo versorgt die Heizung mit 12 V.

2

Öse oder Nadel einsetzen

Impföse oder Nadel in das Quarzrohr des Geräts einsetzen. Es entstehen keine Aerosole.

3

Fertig

Das Instrument ist in etwa 2–4 Sekunden sterilisiert. Auch Röhrchenöffnungen und Objektträger lassen sich sterilisieren.

VERGLEICH MIT DEM BUNSENBRENNER

	GAS-BUNSENBRENNER	SIRIUS
Energie	Erdgas oder Flüssiggas	Strom
Offene Flamme	Ja	Nein
Aerosole	Können in der Flamme entstehen	Werden im Quarzrohr verhindert
Sicherheitswerkbank	Kann Strömung und Filter beeinträchtigen	Stört die Strömung nicht, schont den Filter
Zusätzliche Ausstattung	Schlauch, Ständer, Gasanschluss	Nicht erforderlich

ANWENDUNGEN

- Mikrobiologische Labore in Klinik und Krankenhaus
- Arbeiten in der Sicherheitswerkbank
- Pathologie und Zytologie (Objektträger-Fixierung)
- Universitäts-, Forschungs- und Lehlabore

VOM HERSTELLER

- Vertrieb und Rechnung direkt vom Hersteller
- Stets auf Lager; schneller Weltversand als Mikroexport
- Hersteller-Service und Ersatzteile

TECHNISCHER SERVICE UND ERSATZTEILE

Gerät defekt? Nicht selbst eingreifen, sondern uns kontaktieren

Als Hersteller beschaffen und tauschen wir alle Teile, vor Ort oder nach Einsendung des Geräts. Wir warten Geräte aller Marken und Modelle.

Heizelement-Austausch

Lüfter-Austausch

Trafo-Austausch

Quarzrohr-Austausch

Sicherheit: Im Gerät befinden sich netzspannungsführende Teile. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, Teile selbst auszutauschen. Ziehen Sie im Störfall den Netzstecker und kontaktieren Sie uns.

Für Angebot und Service

+90 507 099 95 07

WhatsApp und Telefon · info@siriusmikro.com · siriusmikro.com/de/

Turaboğlu Sok. Hamidiye Yazgan İş Merkezi No:4, Kadıköy / İstanbul, Türkei



Angebot anfordern



Serviceanfrage